

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

广东蓝宝智能科技有限公司
Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.


服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

● **BLAUPUNKT**

User Manual

使用说明书
冷热气压眼部按摩仪

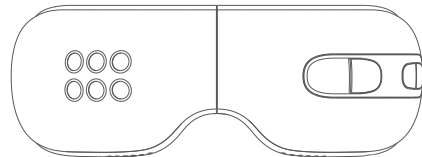

Enjoy it.

Enjoy it.

眼部按摩仪
EYE MASSAGER
BP-HY01

免责声明

01. 我公司保留修改本使用指南中任何信息的权利, 无需进行提前通知且不承担任何责任。
02. 本使用指南中的内容, 除非适用法律要求, 我公司对本使用指南中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证, 包括但不限于销售或者使用于某特定目的的保证。
03. 在法律允许的范围内, 我公司在任何情况下, 都不对因使用本使用指南相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿, 也不对任何利润、数据、商誉或可预期损失进行赔偿。
04. 若需将本产品出口、再出口、或者进口, 请遵守中华人民共和国进出口管制法律和法规。
05. 由于您违法违规操作本产品而造成的人身财产伤害, 或造成其他社会危害, 我公司将不承担由此带来的任何损失。
06. 由于您的不正当操作而导致本产品损坏, 将不能享受国家《三包法》相关的“三包”服务条款。

目录

欢迎您广东蓝宝智能科技有限公司(以下简称“我公司”)产品, 为了您能够更充分的体验我公司产品给您带来的欢乐, 请您务必仔细阅读并保存本使用指南。

注意事项	01	运输于贮存及规格	08
包装说明	03	产品信息	09
使用前准备	04	故障排除及检修	10
产品展示	05	环保说明	11
功能操作提示	06	产品保修须知	13
一键操控 四种模式	07	产品保修卡	14

注意事项

危险警告

有下列情况之一者, 请勿使用本产品

- ※ 佩戴隐形眼镜者, 取下隐形眼镜后再使用。
- ※ 眼部手术后康复阶段者。
- ※ 正在接受治疗、并感觉身体异常的患者。
- ※ 高血压、眼压高、动脉硬化或脑血栓患者。
- ※ 高烧、恶性肿瘤患者和骨质疏松症患者。
- ※ 感染性疾病患者。

注意事项

注意

01. 使用或清洁产品前请务必提前将插头从插座拔出。
02. 请将本产品远离水源、火源及具有腐蚀性的环境。
03. 如产品在充电时不慎落水, 请立刻拔出插头, 切勿直接接触落入水中的产品。
04. 请勿在潮湿、高温、高电磁环境中使用本产品。
05. 本产品含有锂电池, 请勿自行拆卸、改装或投掷火种中, 以免发生危险。
06. 本产品具有恒温加热功能, 超长时间使用加热功能或对温度敏感者可能导致低温烫伤。
07. 请勿长时间连续使用本产品, 否则可能引起按摩部位的疲劳及不适。
08. 本产品不适用于任何病人或无操作能力的人。
09. 无成人看护时, 请勿将儿童或能力受限者使用本产品。
10. 本产品为家用电子产品, 不作为医疗器械, 不适用于诊断、治疗和其他商业用途。

包装说明

在使用产品之前,请先检查内部附件的完整性,如有缺失或物件损坏的情况下,请与销售商取得联系并更换新的物件。

包装内物件清单如下

- 01. L80主机 *1
- 02. Type-C充电线 *1
- 03. 产品收纳袋 *1
- 04. 使用指南合格证保修卡(合订) *1

使用前准备

请确认产品是否有电,如果电量过低,机器功能关闭或无法开机时,请充电后再使用。

充电


1. 将USB充电线接入产品充电孔。
2. 充电过程中指示灯为红色,充电完成后指示灯为蓝色。
3. 充电过程中,产品不支持开机工作,开机状态下进行充电,产品会自动关机。
4. 主机采用内置可充电电池,充电时间3.5-4小时。
5. 在使用过程中语音提示低电量报警,请暂停使用,待充满电后再使用。

多种充电方式

电脑USB接口/移动电源5V=2A低电源适配器

注: 开机默认工作时间为10分钟,如需延长使用时间需要再次开启主机。

产品展示

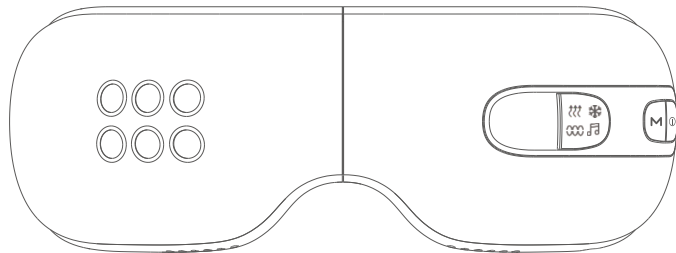

功能操作指示

- 1.“**I**”长按3秒开关机，短按一次进行模式切换。产品共有四种模式:动感模式、温感模式、冰感模式、自动模式依次循环。在播放音乐的情况下双击两次可暂停播放，再次双击恢复播放。
- 2.“**M**”气压模式切换键，产品共有三种气压模式:炫动气压、气压关闭、智能气压依次循环。开机默认为智能气压。在动感模式无气压关闭模式
- 3.语音指令:连接蓝牙后“滴”一声进行语音提示;断开蓝牙产品语音播报“蓝牙已断开”。
- 4.音乐播放时🎵点亮，有气压时🔋点亮，温感(热敷)时🔥点亮，冰感(冰敷)时❄️点亮，自动模式🔥和❄️同时点亮。
- 5.电池电量低时,产品进行电池电量侦测报警“电池电量低”语音提示5次后自动关机。
- 6.关机后风扇会再转动1分钟后停止。

一键操控 四种模式

功能模式:

动感模式 气压 + 音乐 (此模式无气压关闭功能)

温感模式 气压 + 热敷 + 音乐

冰感模式 气压 + 冷敷 + 音乐

自动模式 气压 + 冷热循环 + 音乐

运输于贮存及规格

请确认产品是否有电, 如果电量过低, 机器功能关闭或无法开机时, 请充电后再使用。

大气气压: 86kpa-106kpa

环境温度: -10°C~65°C

相对湿度: ≤80%RH, 无腐蚀性气体和通风良好的室内。

运输: 本产品设有简易防震设施, 适合航空、铁路、公路及轮船运输, 应避免雨、雪淋溅, 倒置和碰撞。贮存期超过6个月时应开箱检查, 并做通电半小时处理, 不能紧靠地面、墙壁和房顶。室内应通风良好, 避免强烈日光照射和腐蚀气体侵蚀。

产品信息

产品名称:	智能眼部按摩仪
产品型号:	BP-HY01
输入电压:	5V =
输入电流:	2A(最大)
输出功率:	4.5W
电池容量:	2500mAh
充电接口:	Type-C
产品重量:	约446g
产品尺寸:	210x115x80(mm)
执行标准:	GB4706.1-2005 GB4706. 10-2008

故障排除及检修

- 1.使用操作时如出现故障, 请进行以下检查。
- 2.产品基本故障排查后仍然无法解决, 请致电售后客服或关注公众号咨询客服人员。请勿自行拆装本产品。

基本故障	可能引发的原因	基本排除方法
无法开机	电池电量不足	充电后再使用
气压无法使用	气压调到关闭状态	将气压模式调整到智能气压或炫动气压
无法制冷	工作模式不对或使用时间过长	请手动调整到冰敷模式或产品关机半小时后再使用
无法加热	工作模式不正确	请手动调整到温感模式
无法充电	USB充电线未插到位	正确插入USB充电线

环保说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
织带	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
Pu气袋	○	○	○	○	○	○
充气泵	○	○	○	○	○	○
皮革	○	○	○	○	○	○

环保说明

本表格依据SJT 11364的规定编制。

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
- ×表示该有害物质至少在该部件的某-均质材质中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。
- ※ 电路组件包括印刷电路板机器构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等。

品质检验

本产品出厂时已经过本公司严格的检测程序,请放心使用!

检验员: _____ 出厂日期: _____

产品保修说明

为了让您更好的享受我公司的各项服务,请仔细阅读以下内容:本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期,在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障,可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内,享受无偿维修服务(随机附件:USB线等,不在保修范围内)。在保修期(含“三包”有效期)内以下情况将实施有偿维修服务,同时不享受“三包”服务:

- (1)不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- (2)购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- (3)由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- (4)在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。
- (5)由于未能按照<产品使用指南>上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- (6)未经本公司授权对产品进行的拆卸、维修、改装而造成的故障。

*需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往本公司售后中心,运输费用由用户承担。如若运输途中产品损坏,将不能享受国家《三包法》相关的“三包”服务条款。

产品保修卡

购其产品时,请以真填写此卡,并予妥善保管。

用户档案

用户姓名	
通讯地址	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
销售单号	
品名及规格	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	